

エアーマッサージチェア

HPC-2000形

医療機器認証番号:
220AGBZX00241000

このたびは、エアーマッサージチェア「HPC-2000」をお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保存してください。



目次

- 安全上のご注意…………… 2～5
- 各部のなまえとはたらき…………… 6～7
- ご使用の前に…………… 8
- 使いかた…………… 9～10
- お手入れのしかた…………… 11
- 長期間使用しないときは…………… 11
- 故障かな?と思ったら…………… 12
- 仕様…………… 12
- 保証とアフターサービス…………… 13
- 製品を廃棄するときのお願い…………… 13
- ご相談窓口…………… 14

- このエアーマッサージチェアは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。



Hitachi Living Systems

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL. (03) 3260-9611 FAX. (03) 3260-9739

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。
[2008-11]




安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び*物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

〈絵表示の例〉

	△記号は、 警告・注意 を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は一般的な警告・注意)
	⊘記号は、 禁止 の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を 強制 したり 指示 したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに本体の「電源」ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



- 煙が出ている、変なにおいや音がする(異常状態)
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



- 本機の内部に水などが入った場合
- 本機の内部に異物などが入った場合
- 落としたり、キャビネットを破損した場合
- 電源コード、リモコンコードが損傷または断線した場合

警告



禁止

次の人は使用しない。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓症(血束)・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症をふくむ)など
 - ・急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症の人
 - ・変形性股関節症など関節の悪い人・骨粗しょう症の人
 - ・使用中に足のしびれ、だるさを感じた人
- 症状を悪化させる恐れがあります。

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・妊娠中または出産直後の人
 - ・糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人
 - ・治療部位に創傷のある人
 - ・安静を必要とする人
 - ・体温38℃以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状(けん怠感・悪寒・血圧変動など)の強い時期・衰弱しているとき
 - ・骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折・急性疼(とう)痛性疾患の人、背骨(脊椎)に異常のある人。または、背骨が左右に曲がっている人
 - ・捻挫、肉ばなれなど炎症性疾患の人
 - ・上記以外に身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- 体調不良・けがをする恐れがあります。

本製品のご使用は1回15分以内とする。続けて使用する場合は、30分以上あけて使う。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となる恐れがあります。



ぬれ手禁止

体がぬれたままの状態では、絶対に使わない。

感電・故障の恐れがあります。



水場禁止

本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしない。また、お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。

感電・故障の恐れがあります。



必ず守る

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼する。
感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

リクライニングした時に壁や物にあたらないように背部側を50cm以上空けてください。

リクライニング操作をする時は周囲に人やペットがいないことを確認する。
事故やけがの恐れがあります。



分解禁止

本製品やリモコンなどの改造・分解・修理は絶対にしない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

電源コードを傷めない。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、特に移動中は挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人また、自分で操作できない人は使用しない。
感電・けがをする恐れがあります。



禁止

交流100V以外では使わない。また、コード類を本体に巻き付けない。
火災・感電の原因になります。




子供に本製品の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
けがや故障の原因になります。

背もたれと座面のすき間や座面の下に、手・腕・足や頭を入れない。
事故やけがの恐れがあります。





頭や腹部などへは使用しない。
体調不良やけがの恐れがあります。

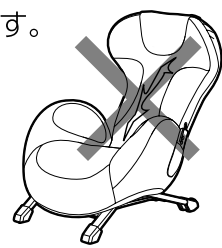安全上のご注意




警告

 禁止	<p>素肌で使用しない。 素肌への直接のマッサージは皮膚を傷める原因になります。</p>	 禁止	<p>本体カバーをはずしたり、破れた状態では使用しない。 事故やけがの恐れがあります。</p> 
	<p>リモコンコード・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p>		

注意


 必ず守る	<p>使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談する。</p>	 電源プラグを抜く	<p>ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 漏電・火災や感電の恐れがあります。</p>
	<p>使用しても、効果が現れない場合、医師または専門家に相談すること。</p>		<p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う。 火災・感電の恐れがあります。</p>
	<p>本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使う。 故障や事故の原因になります。</p>		<p>停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故の原因になります。</p>
	<p>本製品を使用する前には、電源スイッチ・リモコンが正常に作動するか確認する。 事故やケガの恐れがあります。</p>		<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く。また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>背部を起こす時や倒す時にストッパー部に指をはさまないようにご注意ください。</p>		<p>食後及び飲酒後はすぐに使わない。 気分が悪くなったり、事故やけがの恐れがあります。</p>
	<p>本製品をしばらく使用せず、再度使用するときは必ず全ての機能が正しく動作することを確認する。</p>		<p>電源コードおよびリモコンの上に重い物を載せたり、落としたり、コード類を本体の下敷きまたは足にコード類をはさまない。 火災・感電の恐れがあります。</p>
 アース	<p>安全のためにアースを確実に取り付けること。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、アースの取り付けはご購入先にご相談下さい。</p>	 禁止	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 又ホットカーペット等の暖房器具の上で使わない。 火災の恐れがあります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。 感電の恐れがあります。</p>		

注意


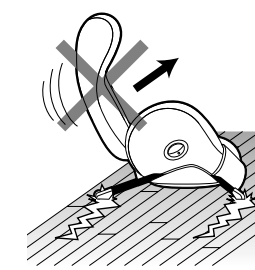
 禁止	<p>生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。 けがや故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>電源プラグはコンセントに確実に差し込み、ゴミを付着させない。また、たこ足配線はしない。 感電・ショート・発火の恐れがあります。</p>
	<p>電源コードを無理に折り曲げたり、継ぎ足したりしない。 火災の恐れがあります。</p>		<p>本体の上に立ったり、本体を踏み台にしたり、重い物を載せない。 故障・事故・けがをする恐れがあります。</p>
	<p>リモコンに衝撃を与えたり、落下させない。 誤動作や故障の原因になります。</p>		<p>本製品は一般家庭用なので、業務用として使わない。</p>
	<p>動作中の各部に故意に力を加えて無理やり止めない。 故障・けがをする恐れがあります。</p>		<p>可燃物や火気の近くでは使わない。 変形・故障・発火する恐れがあります。</p>
	<p>眠りながらの使用はしない。 無意識での使用は、けがや体調不良の原因になります。</p>		<p>機械油などの油成分が浮遊している場所および化学薬品などの成分が浮遊している場所では使わない。 変形・故障・発火するおそれがあります。</p>
	<p>木床や畳など傷つきやすい床面でのキャスター移動や引きずっての移動はしない。また移動後は静かに設置する。 床面に傷がつきます。</p> 		<p>ベンジン・シンナー・アルコールなどで拭いたり、殺虫剤などを本体にかけない。 ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。</p>
<p>本製品に毛布などをかぶせて使用しない。 発火や本体内部の温度が高くなる原因になります。</p>	<p>使用中、子供をそばに近づけない。 事故・けがをする恐れがあります。</p>		
	<p>本機をご使用になりながら他の治療器を同時に使用しない。</p>		<p>しり・ももをマッサージするときはズボンのポケットに硬いものを装着したまま使用しない。 事故やけがの恐れがあります。</p>

各部のなまえとはたらき

〈本体〉

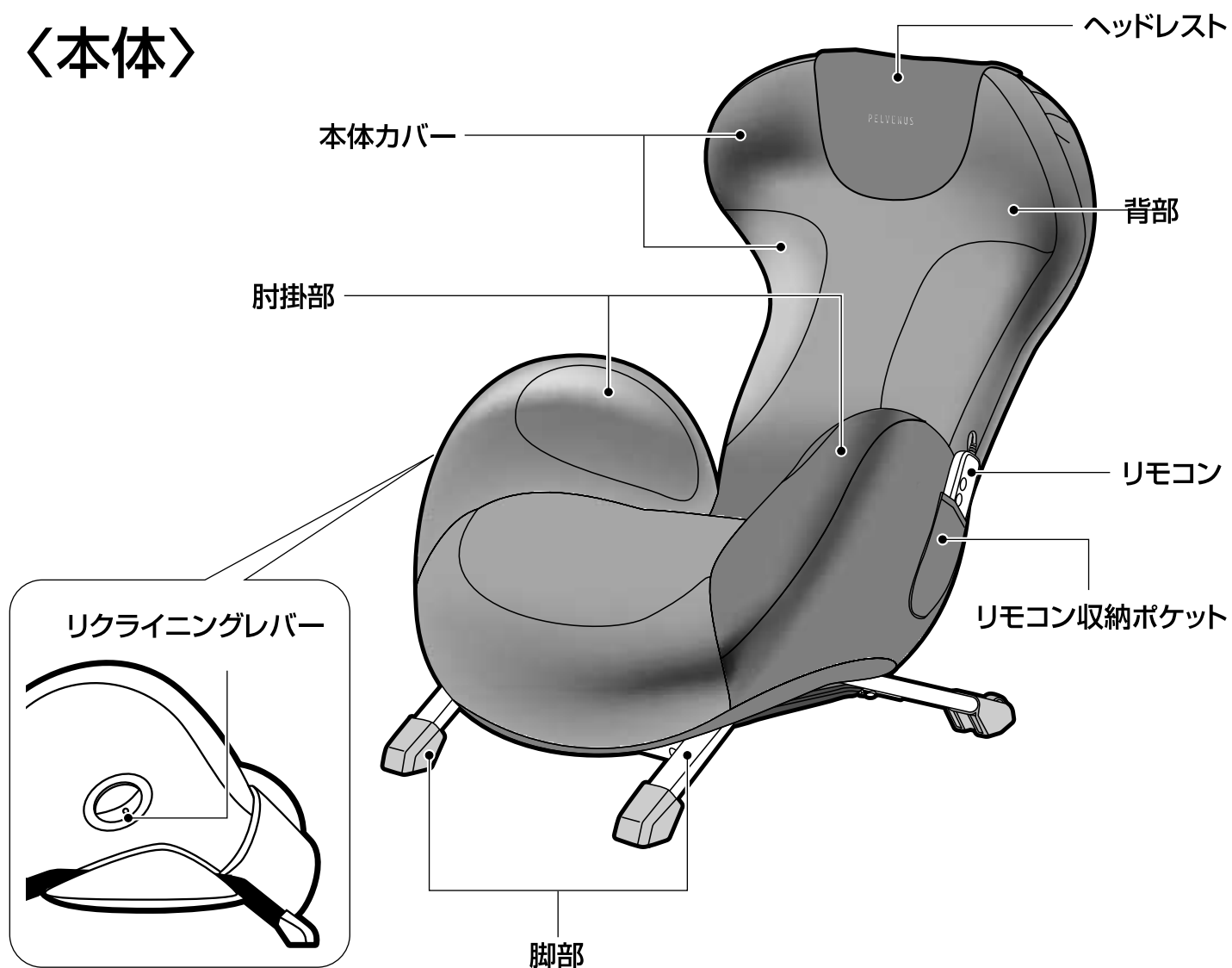


背面図

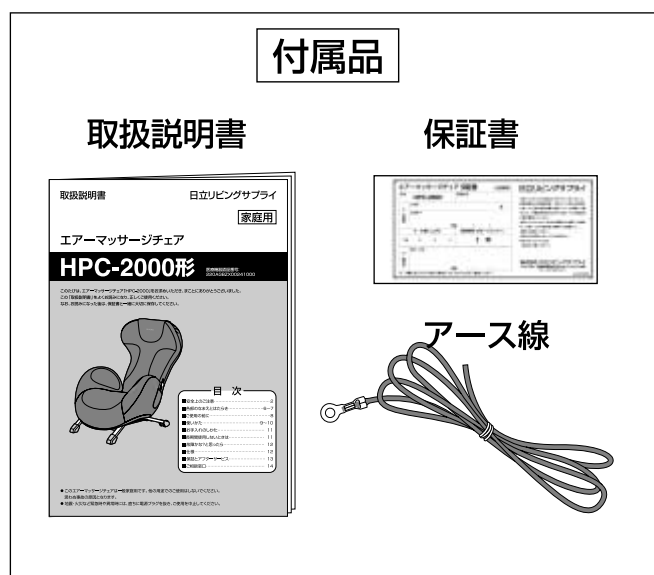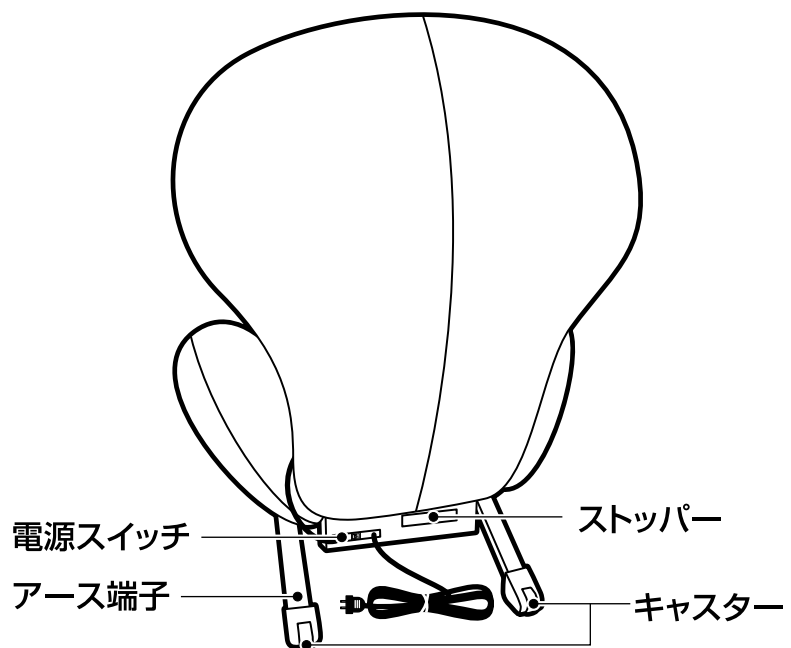

〈リモコン〉

電源ランプ
電源スイッチを入れると点灯します。

動作部位表示ランプ
重点的に動作する部位（骨盤・尻・背）のランプが点滅します。（ランプが点かない部位も動作することがあります）

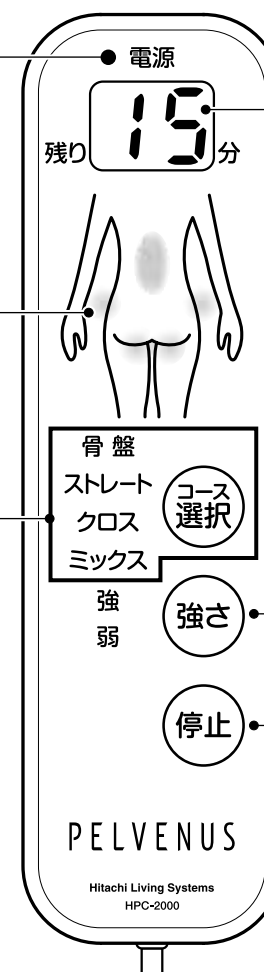

残り時間表示
使用時間がカウントダウンにて表示されます。


強さ調整ボタン
エア-の強さを強・弱の2段階で設定できます。

停止ボタン
停止状態になります。

自動コース

- 骨 盤**...骨盤を左右からしっかりと押圧、ヒップを押し上げ骨盤まわりをマッサージ。さらに背筋とヒップの筋肉をストレッチします。
- ストレート**...骨盤を挟みこみ、座面と背面の2カ所から前方向に背筋を押し上げストレッチします。
- ク ロ ス**...骨盤の片側を押しながら逆側の背筋を伸ばしてひねるようにストレッチ。これを重点的に繰り返し左右のバランスを整えます。
- ミ ッ ク ス**...骨盤、ストレート、クロスの各コースをタイミング良く組み合わせ、骨盤まわりと上半身のストレッチを同時に行います。

エア-バッグ配置図

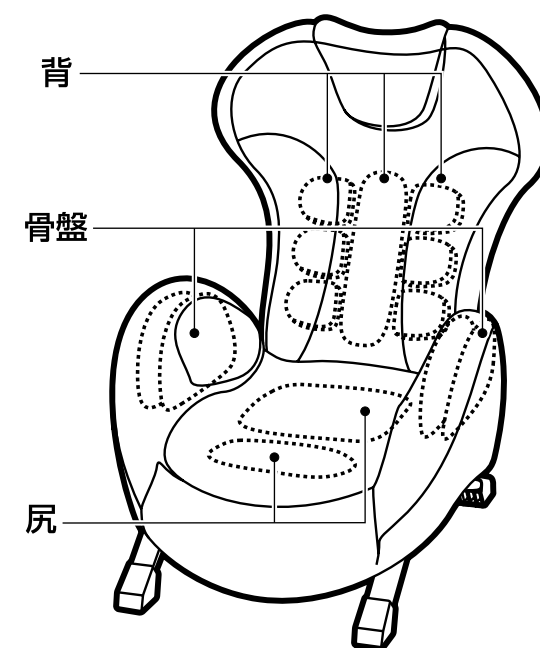


ご使用前に

本体をセットします

背部を起こすと本体裏のストッパーがカチッとロックされます。


設置場所について

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 本製品の下にマットを敷くと床の傷つき防止になります。
- リクライニングした時に壁や物にあたらないように背部側を50cm以上あけてください。
- 高温多湿・直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には設置しないでください。

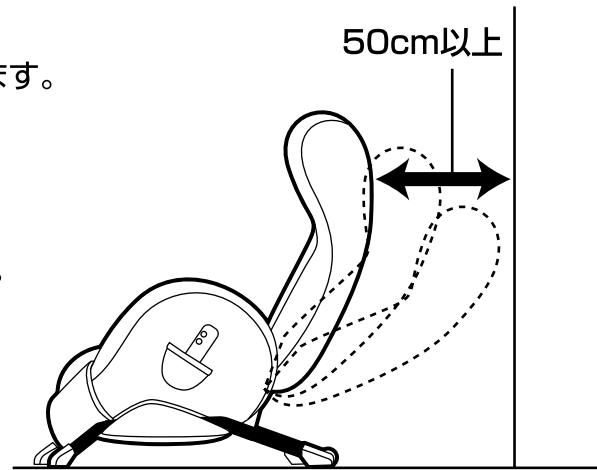

本製品の移動のしかた


- 背もたれ部の上部を下方に押し、座部前側を浮かせて移動させてください。
- 移動する時床を傷つける恐れがありますので、ゆっくり移動してください。

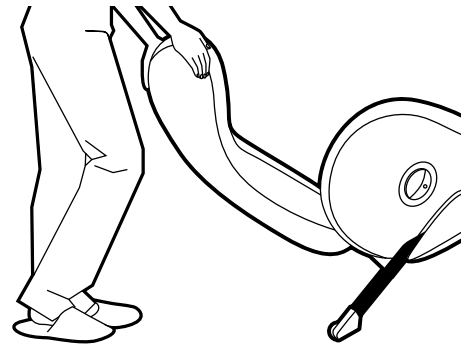

付属のアース線を取り付ける

電源コンセントにアース端子が有る場合

- アース線を、本体のアース端子(ネジ)と電源コンセントのアース端子に取り付けてください

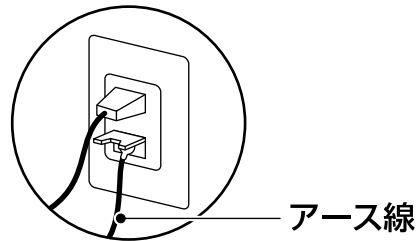

アース線

電源コンセントにアース端子が無い場合

- お買い上げの販売店、電気工事店に相談し、アース工事(D種<第三種>接地工事)をしてください。(アース工事費は本製品の価格に含まれておりません。)

取り付けてはいけないところ

- ガス管……………爆発や引火のおそれがあります。
- 電話線や避雷針……落雷の時、感電や発火のおそれがあります。
- 水道管……………途中がプラスチックの場合はアースになりません。

⚠️ 注意	
	安全のためにアースを確実に取り付けること。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 また、アースの取り付けはご購入先にご相談下さい。

使い方

はじめに

テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。
また同じコンセントを使用しないでください。雑音が入ることがあります。

1 本体カバーを確認します


ご使用前には、本体カバーが破れていないかを必ずご確認ください。

⚠️ 警告	
	本体カバーをはずしたり、破れた状態では使用しない。 事故やけがの恐れがあります。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます

3 電源スイッチを入れます

コントロール部の電源ランプが点灯します。

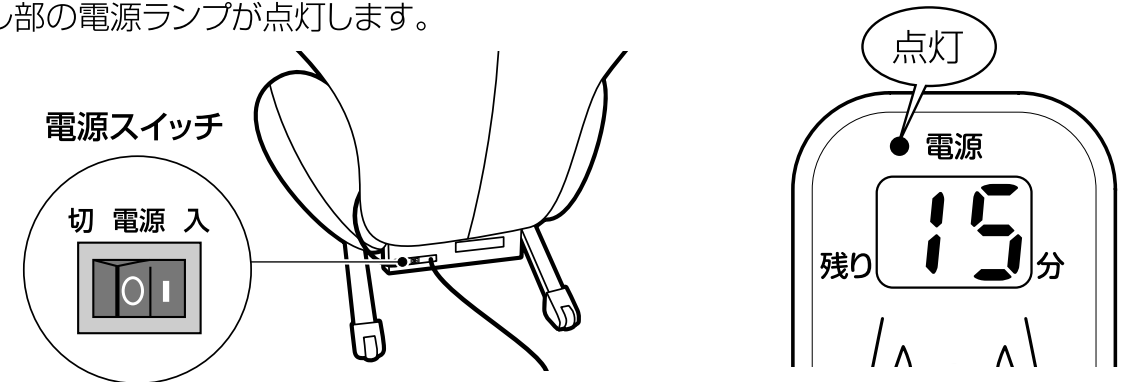


4 椅子に座ります

深く腰かけてください。

5 リクライニング角度を調整します

本体右側のリクライニングレバーを引き上げながら、ご自身の力で背もたれを押してください。
好みの角度でリクライニングレバーを離すと背もたれが固定されます。
本製品のリクライニング角度は100度~130度となっております。

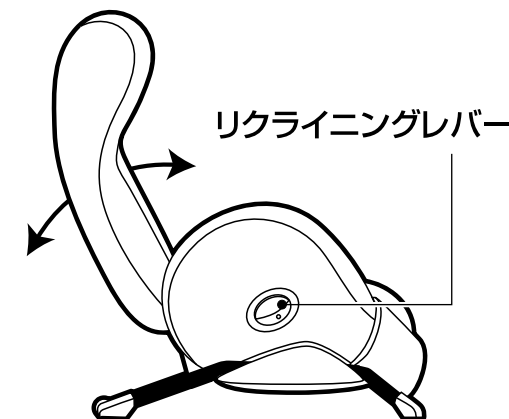

⚠️ 警告	
	リクライニングした時に壁や物にあたらないように、背部側を50cm以上開けてください。
	リクライニング操作をする時は周囲に人やペットがいないことを確認してください。 事故やけがの恐れがあります。

使い方 (つづき)

6 お好みのコースを選択します。

お好みのコースと、強さを選びます。強さは強・弱の2段階です。

骨盤	骨盤を左右からしっかりと押圧、ヒップを押し上げ骨盤まわりをマッサージ。さらに背筋とヒップの筋肉をストレッチします。
ストレート	骨盤を挟みこみ、座面と背面の2カ所から前方向に背筋を押し上げストレッチします。
クロス	骨盤の片側を押しながら逆側の背筋を伸ばしてひねるようにストレッチ。これを重点的に繰り返し左右のバランスを整えます。
ミックス	骨盤、ストレート、クロスの各コースをタイミング良く組み合わせ、骨盤まわりと上半身のストレッチを同時に行います。

7 タイマーが働き、自動的に終了します。

約15分経過すると、エアバッグからエアが抜け、自動的に停止します。

途中で止めたいときは

停止を押します。

- エアバッグからエアが抜け停止します。


8 本体電源スイッチを切ります。

電源ランプが消灯します。

9 コンセントから電源プラグを抜いてください。

10 背部を折り畳みます。

本体裏のストッパーを手前に引き、背もたれ部を前にゆっくり倒してください。

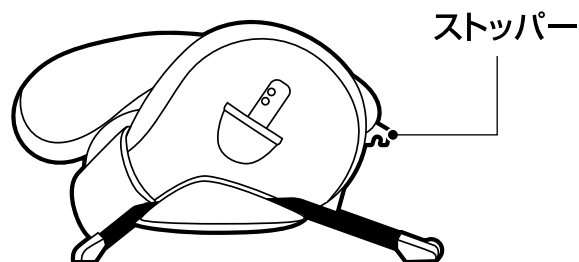

⚠️ 注意

! 必ず守る	背部を起こす時や倒す時にストッパー部に指をはさまないようにご注意ください。
------------------	---------------------------------------

お手入れのしかた

本体カバー部


汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

リモコン

乾いた布で拭いてください。

脚部

薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、さらによく水拭きをしてから乾いた布で拭いてください。

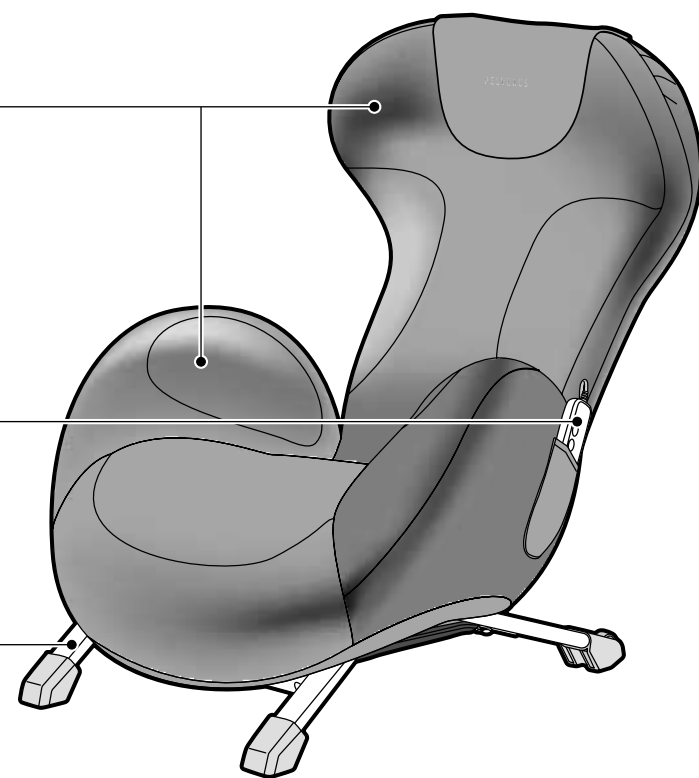

⚠️ 注意



電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
漏電・火災・感電の恐れがあります。



禁止

ベンジン・シンナー・アルコールなどで拭いたり、殺虫剤などを本体にかけない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

長期間使用しないときは

- 高温・多湿・直射日光の当たる場所・ホコリの多い所には保管しないでください。
- 電源コードは抜いた状態で保管してください。
- 電源コードやリモコンコードは傷がつかないように保管してください。
- 汚れやほこりを取った後、湿気の少ない場所に保管してください。

⚠️ 注意



必ず守る

本製品をしばらく使用せず、再度使用するときは必ず全ての機能が正しく動作することを確認する。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに
ご使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎P14)にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
音が気になる。 (運転時の音) ブシュー音、カチ音、シュー音、スー音、 ブー音、パコ音、ミッシミッ音	エアバッグのふくらむ音、 しばむ時の音、切替弁の音、 ポンプなどの動作音	構造上やむをえず発生するもの で機能などに影響はありません。
動かない。	●電源プラグがはずれている。 ●電源スイッチが入っていない。	●電源プラグをコンセントに 差し込む。 ●電源スイッチを入れる。
使用中に止まった。	タイマーが働き、停止状態に なっている。	30分以上間をあけてから再度 操作する。

仕様

品名	エアーマッサージチェア HPC-2000		
消費電力	55W	一般的名称	家庭用エアーマッサージ器
電源	AC100V 50/60Hz	医療機器 認証番号	220AGBZX00241000
寸法 (通常時)	幅670×奥行750×高さ950mm	構造部材	金属(スチールパイプ)ポリエチレン樹脂
寸法 (リクライニング時)	幅670×奥行1,050×高さ800mm	クッション材	ウレタンフォーム
定格時間	15分	張り材	ポリエステル100%
タイマー	15分	コードの長さ	2.5m
効果・効能	あんまマッサージの代用。一般家庭で使用すること。 (疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解)		
製造販売元	株式会社 惣田製作所 滋賀県彦根市鳥居本町492		
医療機器製造 販売許可番号	25B2X10001		

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口
(☎P14)にお問い合わせください。

① 保証書	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。	
② 修理を依頼される ときは 出張修理	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
	保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。
③ 補修用性能部品の 保有期間	エアーマッサージチェアの補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
④ ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。	

製品を廃棄するときのお願い

・機器本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または、規則に従って処理してください。
詳しくは、各自治体にお問い合わせ下さい。

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28

FAX 03-3260-9739

(受付時間)

9:00~17:30

携帯電話、PHSからもご利用できます。土曜・日曜・
祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませて
いただきます

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

愛情点検



長年ご使用の家電品の点検を!

このような症状は
ありませんか

- 電源プラグやコードが異常に熱い
- コゲくさいにおいがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常、故障がある

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。