

## エアー座イスマッサージャー保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

|      |          |     |               |           |
|------|----------|-----|---------------|-----------|
| 形名   | HZM-100形 |     | ※ お 買 い 上 げ 日 | 保 証 期 間   |
|      |          |     | 平 成 年 月 日     | 本 体 : 1 年 |
| ※お客様 | ご住所      | 〒 - |               |           |
|      | ご芳名      |     |               | 様         |
| ※販売店 | 住所       | 〒 - |               |           |
|      | 店名       |     | TEL           |           |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☎ 14ページ)にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎ 14ページ)にご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口(☎ 14ページ)へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎ 14ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☎ 13ページ)をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

## 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)  
TEL.03(3260)9611  
FAX.03(3260)9739

2010-11

## 取扱説明書

日立リビングサプライ

家庭用

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

# エアー座イスマッサージャー HZM-100形

医療機器認証番号:  
222AGBZX00232000


このたびは、エアー座イスマッサージャー「HZM-100」をお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保存してください。

## 目次

- 安全上のご注意 . . . . . 1
- 効能・効果 . . . . . 4
- 各部のなまえとはたらき . . . . . 5
- 使いかた . . . . . 7
- お手入れ . . . . . 11
  - 長期間使用しないときは . . . . . 11
- 故障かな?と思ったら . . . . . 12
- 仕様 . . . . . 12
- 保証とアフターサービス . . . . . 13
- 製品を廃棄するときのお願い . . . . . 13
- ご相談窓口 . . . . . 14
- 保証書 . . . . . 裏表紙

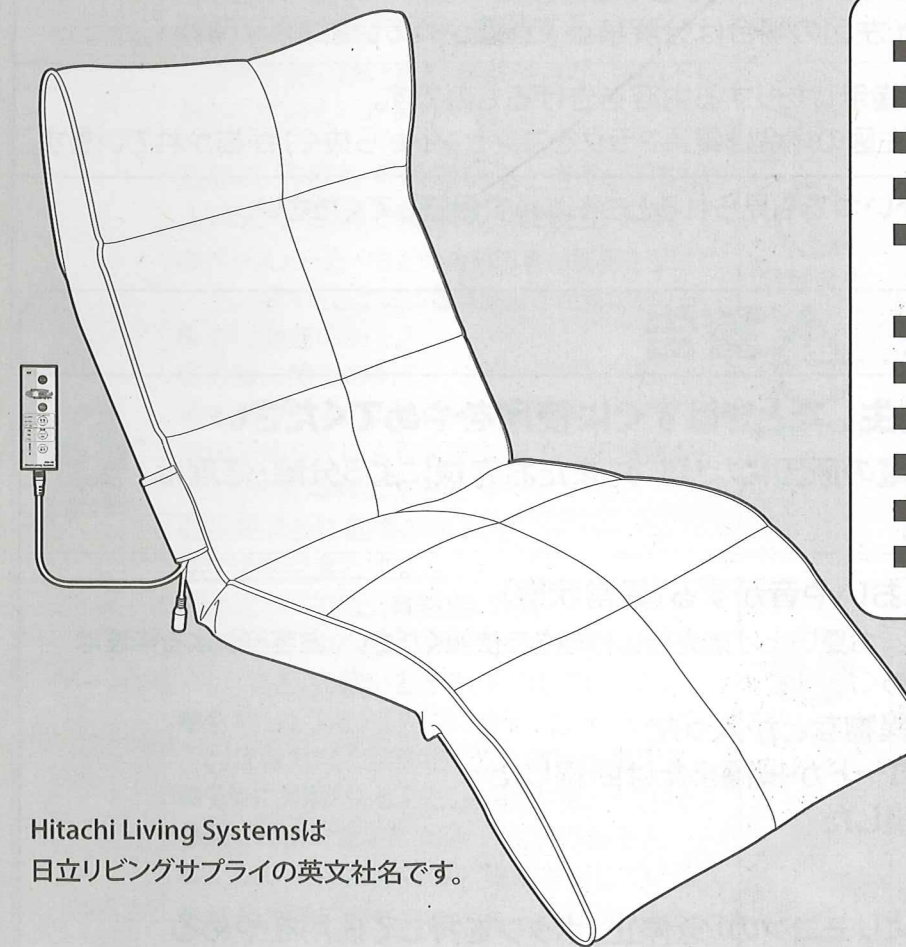



Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です。

- このエアー座イスマッサージャーは一般家庭用です。他の用途での使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.






# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。      |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

## 〈絵表示の例〉

|   |   |
|---|---|
|   | △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。              |
|   | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。                   |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。 |

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。またお客様による分解・修理は絶対にお止めください。



必ず守る

- 煙が出ている、変なおいや音がする（異常状態）  
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
  - 本製品の内部に水や異物などが入った
  - 電源コード、リモコンコードが損傷または断線した
  - 落としたり、本体を破損した
- ①使用中の場合はすぐにリモコンの「急停止」ボタンを押して使用をやめる
  - ②リモコンの「入／切」ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
  - ③お買い上げ販売店へ修理を依頼する

## 警告



禁止

### 次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓（塞[そく]栓）症・重度の動脈瘤（りゅう）・急性静脈瘤（りゅう）・各種皮膚炎および各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など  
症状を悪化させるおそれがあります。

### 自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。

事故やけがのおそれがあります。

### 幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。

けがや故障のおそれがあります。

### 使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。

そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

### 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中の人、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な抹消循環障害からくる知覚障害のある人
- 治療部位に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人  
例：急性炎症症状（けん怠感、悪寒、血圧変動など）の強いときや、衰弱しているとき
- 骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫（ねんざ）、肉ばなれなど急性疼（とう）痛性疾患の人
- 背骨に異常のある人または左右に曲がっている人
- 乗り物酔いなどのめまい症状のある人
- 上記以外に身体に特に異常を感じている人  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

### 電源は交流（AC）100Vを使用する。

守らないと、火災やショートの原因になります。



必ず守る

付属のACアダプター以外は使用しない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグはコンセントに確実に差し込む。  
またたこ足配線はしない。  
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードの取り扱いについては下記の項目に注意する。

- 傷つけたり、破損させたりしない
  - 加工しない
  - 無理に曲げたり、引っ張らない
  - ねじらない
  - 使用時には束ねない
  - 重いものを載せない
  - 挟みこんだりしない
  - 本体に巻きつけない
- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



分解禁止

絶対に分解・改造・修理をしない。  
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。



水濡れ禁止

本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。  
感電や故障の原因になります。



必ず守る

ご使用前に、必ず本体の布カバーが破れていないか確認し、破れた状態では使用しない。  
事故や故障、けがの原因になります。



使用する前に必ず、操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。  
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。


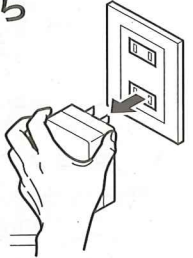

リクライニングを操作するときは、必ず周囲に人やペット、障害物がないことを確認する。

確認しないと、事故やけがのおそれがあります。






# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠️ 注意

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>必ず守る</p> | <p>本製品の使用時間は1回10分以内にする。また同一箇所への連続使用を避ける。続けて使用する場合は、30分以上あけて使用する。筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。(動作中にコースを変更するとタイマーが一度リセットされ、10分以上動作するおそれがありますので注意してください)</p>                     | <p>他の治療器と同時に使用しない。<br/>事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p>  |
|  | <p>電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端のACアダプター本体を持って引き抜く。</p>  <p>電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p> | <p>食後および飲酒後は使用しない。<br/>体調不良をおこすおそれがあります。</p>   |
|  | <p>電源プラグのホコリなどは定期的にとる。ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。</p>   | <p>身体がぬれた状態で使用しない。<br/>感電や故障のおそれがあります。</p>   |
|  | <p>本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。</p>  | <p>本体やリモコン、ACアダプターに重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。<br/>火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。</p> |
|  | <p>しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。</p>  | <p>眠りながら使用しない。<br/>事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p>  |
|  | <p>電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>  | <p>頭部や腹部などには使用しない。また人体のマッサージ以外には使用しない。<br/>事故やけが、故障の原因になります。</p>                         |
|  | <p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>守らないと、感電やけがのおそれがあります。</p>  | <p>本体の上に立ったり、飛び跳ねたり、不安定な姿勢で使用しない。<br/>けがや故障の原因になります。</p>                                 |
|  | <p>使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。</p>  | <p>本体に人または物を乗せたまま移動しない。<br/>転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>                                     |
|  | <p>電源プラグを抜く</p>   | <p>エアバッグに、故意に力を加えて無理やり止めない。<br/>けがや故障の原因になります。</p>                                       |
|  |   | <p>布カバーは取り外しできません。布カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。<br/>けがや故障の原因になります。</p>              |
|  | <p>本製品に毛布などをかぶせて使用しない。本体内部の温度が高くなり、火災や故障の原因になります。</p>   |  |
|  | <p>浴室などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。<br/>感電や故障の原因になります。</p> <p> 水場禁止</p>                                 |  |

## ⚠️ 注意

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>禁止</p> | <p>リモコンのボタンを2つ以上同時に押さない。<br/>故障の原因になります。</p>   | <p> 必ず守る</p> <p>本製品は必ず一人で使用する。こと。</p> <p>本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。</p> <p>本製品でシーソーのように体重を移動させて遊ばない。<br/>けがや故障の原因になります。</p> <p>リクライニングした状態で裏返しにして乗ったり荷重をかけない。<br/>けがや故障の原因になります。</p> <p>勢いよく座ったり、浅い角度でリクライニングした状態で座わない。<br/>重心が後方へかかり床などに後頭部を強打するおそれがあります。</p> <p>裸で使用しない。<br/>施療部(肩・背中・腰・尻・太もも)と皮膚が直接接触しないようにする。<br/>摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。</p> |
|   | <p>ストーブなど火気の近くや室温35度以上の使用、たばこを吸いながらの使用はしない。またホットカーペットなどの暖房器具の上では使用しない。<br/>火災や事故、故障の原因になります。</p> |  |
|   | <p>本体を移動するときは、引きずらないようにする。<br/>床や畳を傷つけるおそれがあります。</p>   |  |
|   | <p>お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。<br/>変形・変色・変質のおそれがあります。</p>                         |  |
|   | <p>直射日光の当たるところでは使用しない。<br/>変形・変色・変質のおそれがあります。</p>  |  |
|   | <p> 禁止</p>    |  |

## 効能・効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。



- 疲労回復
- 血行をよくする
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす



# 各部のなまえとはたらき


## 本体

### 付属品 (ACアダプター)

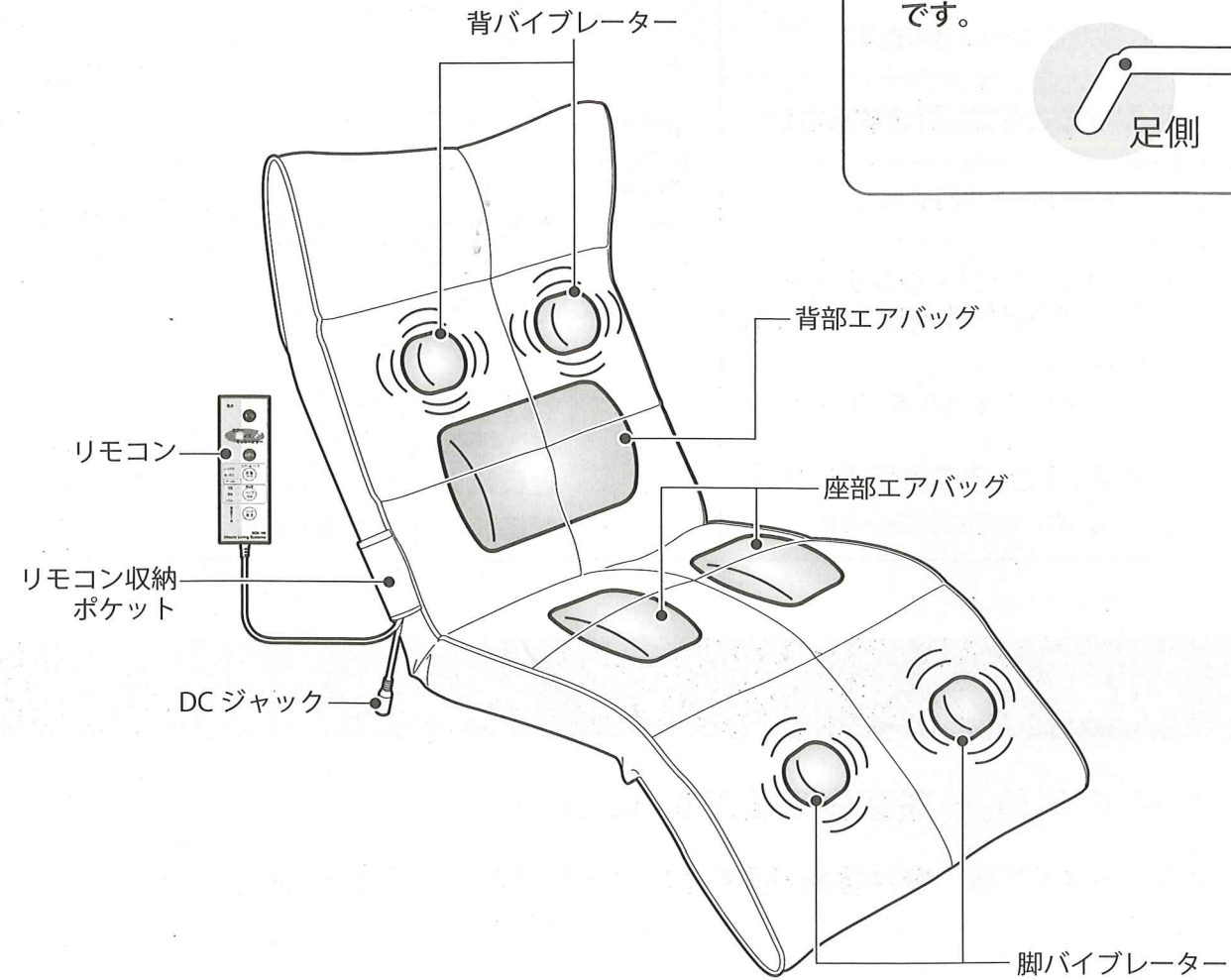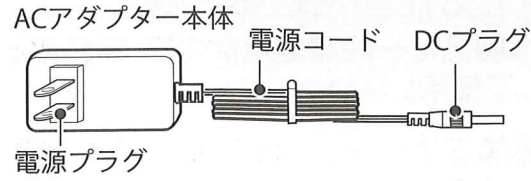

### お知らせ

・頭側と足側を必ず確認し、正しくお使いください。表面に対して内側にリクライニングができる方が頭側です。

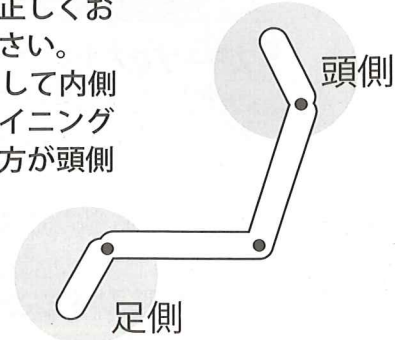

### 警告

⚠ 付属のACアダプター以外は使用しない。  
必ず守る 感電・ショート・発火の原因になります。

### 注意

⚠ 布カバーは取り外しできません。  
布カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。  
けがや故障の原因になります。

## リモコン

### 電源ランプ

「入/切」ボタンを押すとランプが点灯し、電源が入ります。

### 入/切ボタン


マッサージをはじめるとき/終了するときに押します。  
※コース (自動コース・パイプのみ) を選択するまで動きません。

### 急停止ボタン

マッサージを急いで中止するときに押します。

### パイプ強さボタン

バイブレーターの強さを2段階で設定できます。  
コース (自動コース・パイプのみ) を選ぶと、最初は「弱」のランプが点灯します。

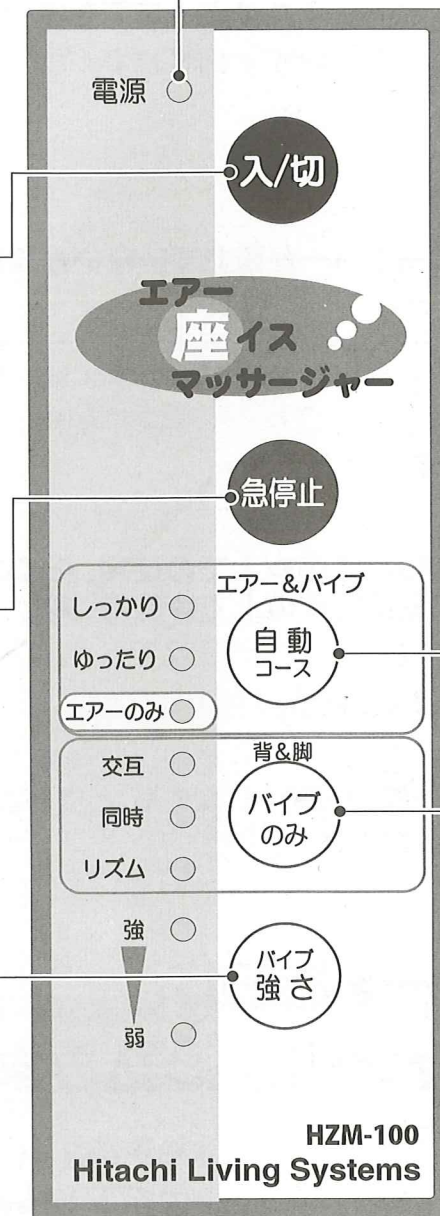

### 自動コース ボタン

3つのコースを選択できます。  
エアースイスとバイブレーターでマッサージし、約10分で自動的に終了します。  
● しっかりコース  
● ゆったりコース  
● エアースイスのみコース  
※各コースの特徴は P9を参照

### パイプのみ ボタン


3つのコースを選択できます。  
バイブレーターのみでマッサージし、約10分で自動的に終了します。  
● 交互コース  
● 同時コース  
● リズムコース  
※各コースの特徴は P9を参照



# 使いかた

## 1 ご使用になる場所にマットなどを敷き、本製品を設置します。

- 周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置してください。
- マットは使用中の動作音をやわらげるためと、床面を傷つけないようにするために敷くことをおすすめします。

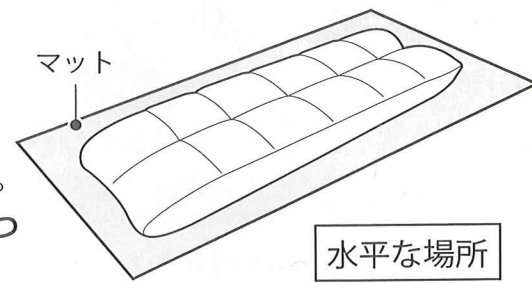

### 警告


- 必ず守る **!** ご使用の前に、必ず本体の布カバーが破れていないか確認し、破れた状態では使用しない。事故や故障、けがの原因になります。

### 注意

- 必ず守る **!** 本製品は必ず一人で使用する。
- 禁止 **!** ストーブなど火気の近くや室温 35 度以上での使用、たばこを吸いながらの使用はしない。またホットカーペットなどの暖房器具の上では使用しない。火災や事故、故障の原因になります。
- 直射日光の当たるところでは使用しない。変形・変色・変質のおそれがあります。
- 裸で使用しない。施療部(肩・背中・腰・尻・太もも)と皮膚が直接接触しないようにする。摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

## 2 本体とACアダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ①本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込みます。
- ②ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

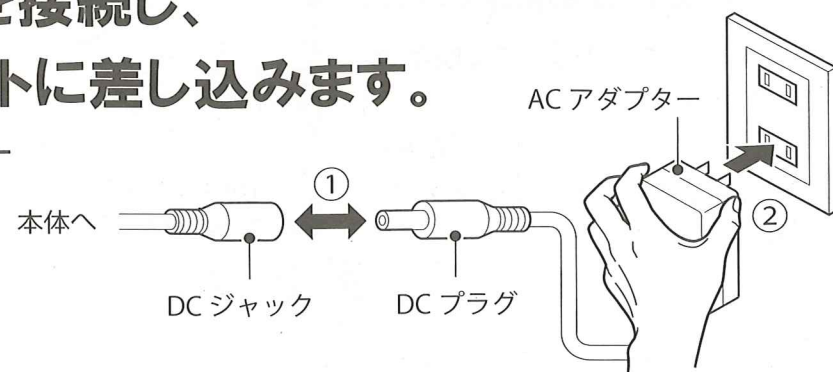

### 警告

- 必ず守る **!** 付属の AC アダプター以外は使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。


- 必ず守る **!** 電源は交流 (AC) 100V を使用する。守らないと、火災やショートの原因になります。

## 3 座イスの角度を調整します。


- 頭・背・足の合計3か所でリクライニング操作が可能です。

### 背

下図のように背の部分を矢印のように起こすと、カチッと音がして①~⑭の位置で止まります。

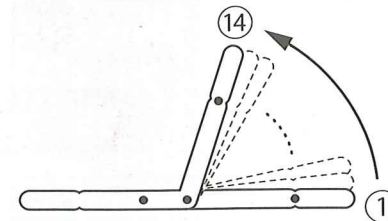


下図のように背の部分を⑭の位置より前方に倒すと、ロックがはずれ元の位置に戻ります。

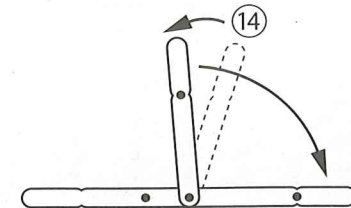


### 頭

下図のように頭の部分を矢印のように起こすと、カチッと音がして①~⑭の位置で止まります。

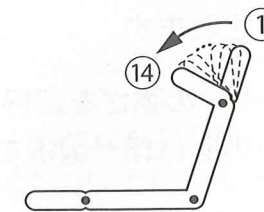


下図のように頭の部分を⑭の位置より前方に倒すと、ロックがはずれ元の位置に戻ります。

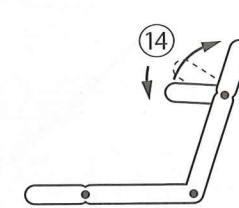


### 足

下図のように足の部分を矢印のように起こすと、カチッと音がして①~⑭の位置で止まります。

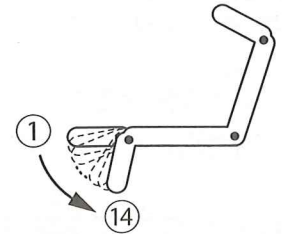

下図のように足の部分を⑭の位置より前方に倒すと、ロックがはずれ元の位置に戻ります。

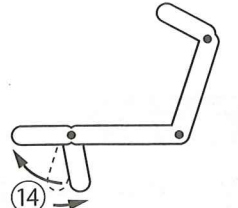

### 警告

- 必ず守る **!** リクライニングを操作するときは、必ず周囲に人やペット、障害物などがいないことを確認する。確認しないと、事故やけがのおそれがあります。


### 注意

- 禁止 **!** ストーブなど火気の近くや室温 35 度以上での使用、たばこを吸いながらの使用はしない。またホットカーペットなどの暖房器具の上では使用しない。火災や事故、故障の原因になります。
- 本製品でシーソーのように体重を移動させて遊ばない。けがや故障の原因になります。
- リクライニングした状態で裏返しにして乗ったり荷重をかけない。けがや故障の原因になります。
- 勢いよく座ったり、浅い角度でリクライニングした状態で座わない。重心が後方へかかり床などに後頭部を強打するおそれがあります。



## 4 リモコンの **入/切** ボタンを押し、電源を入れます。 お好みのマッサージコースを選択します。

- ① リモコンの **入/切** ボタンを押すと、電源ランプが点灯し電源が入ります。
- ② **自動** や **バイブのみ** ボタンを押して、お好みのコースを選択します。  
ボタンを押すごとにコースが変更されます。
- ③ **バイブ強さ** ボタンを押して、バイブレーターの強さを選択します。  
バイブレーターの強さは「強」「弱」の2種類が選択できます。
- ④ 止めるときは **入/切** ボタンを押します。

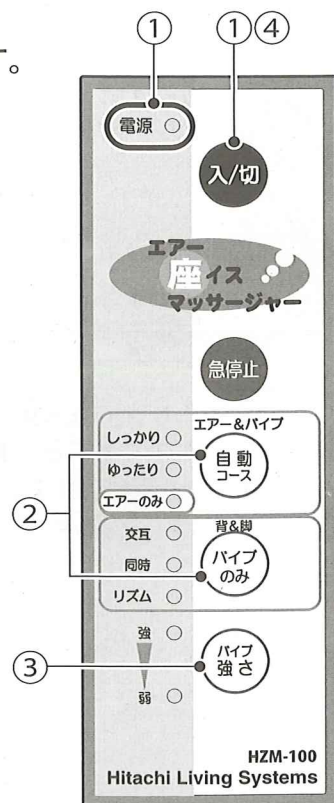

### 注意

- 禁止** リモコンのボタンを2つ以上同時に押さない。  
故障の原因になります。

| 自動コース | エアバッグとバイブレーターを組み合わせたマッサージ      |
|-------|--------------------------------|
| しっかり  | 背中からふくらはぎまでしっかりマッサージ           |
| ゆったり  | ストレッチをするようなゆったりしたマッサージ         |
| エア-のみ | エアバッグのみのマッサージ&ストレッチ            |
| バイブ   | バイブレーターでマッサージ                  |
| 交互    | 背と脚のバイブレーターが交互に短く振動            |
| 同時    | 背と脚のバイブレーターが同時に少し長めに振動         |
| リズム   | 背と脚のバイブレーターを使用し色々な振動を組み合わせたコース |

## 5 タイマーがはたらき、マッサージが自動的に終わります。

- 各コースとも動作開始から約10分経過すると停止します。
- 電源ランプが消灯します。

緊急時など、マッサージを途中で止めたいときは **急停止** を押してください。

### 注意




本製品の使用時間は1回10分以内にする。また同一箇所への連続使用を避ける。  
続けて使用する場合は、30分以上あけて使用する。

必ず守る 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。  
(動作中にコースを変更するとタイマーが一度リセットされ、10分以上動作するおそれがありますので注意してください)

## 6 ACアダプターをコンセントから抜きます。

- ① ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② 本体のDCジャックからACアダプターのDCプラグを抜きます。

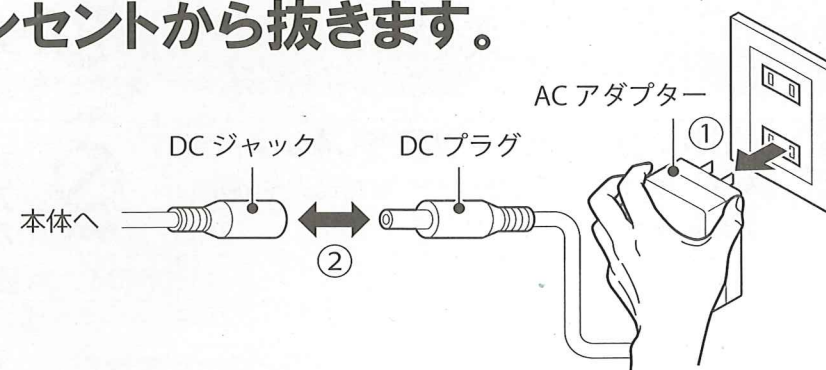

### 注意



電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端のACアダプター本体を持って引き抜く。

電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。


ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



# お手入れ

- 布カバーに付着したホコリは、掃除機などで吸い取ってください。(はたきなどでホコリを取らないでください。内部部品が破損したり、故障の原因となります)
- リモコンの汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、そのあとやわらかい布でからぶきしてください。(本体内部に水などが入らないように注意してください)
- 自然乾燥でよく乾かしてください。

※布カバーは取り外しできません。

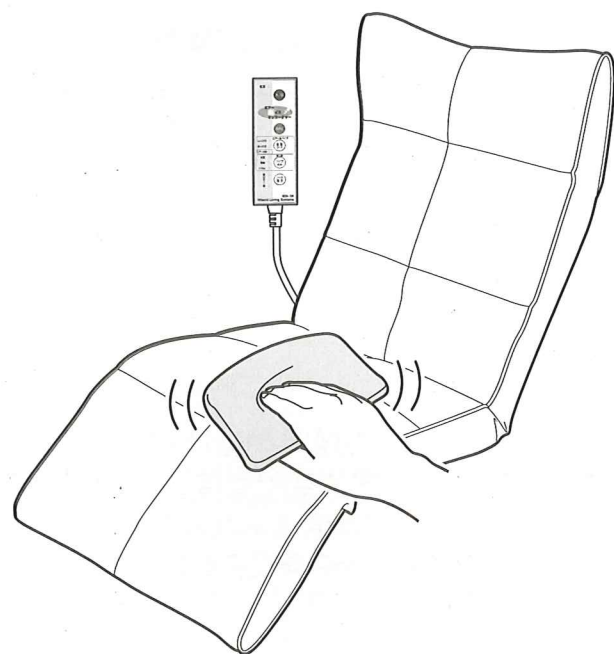

## 警告



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



絶対に分解・改造・修理をしない。  
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

## 注意



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
守らないと、感電やけがのおそれがあります。



お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。  
変形・変色・変質のおそれがあります。

# 長期間使用しないときは

- 使用後は汚れやホコリを、乾いた布などできれいにふき取ってから保管してください。
- しばらくご使用にならないときは、カバーなどをかけホコリが付かないようにしてください。
- 高温・多湿・直射日光の当たるところ、ホコリの多いところには保管しないでください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎P14)にお問い合わせください。

| こんな時は      | 考えられる原因   | こう処置してください   |
|------------|---|--|
| 動作しない      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがはずれている。</li> <li>●専用 AC アダプターが正しく接続されていない。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。(☎P7 参照)</li> <li>●専用 AC アダプターを正しく接続してください。(☎P7 参照)</li> </ul> |
| 使用中に止まった   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●タイマーの働きによるもので約 10 分間動作した後、自動的に停止している。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●30 分以上時間をあけてから、もう一度操作をしてください。</li> </ul>   |
| 動作中の音が気になる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●エアバッグがふくらむとき、しぼむときの「プシュー」「カチ」という音。</li> <li>●ポンプが動くときの「ブーン」という音。</li> <li>●バイブレーターが動くときの「ブーン」という音。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。</li> <li>●動作音が床などに響くようであれば、マットなどを敷いてください。</li> </ul>          |

# 仕様

|               |  |
|---------------|--|
| 販売名           | エアースイスマッサージャー HZM-100                      |
| 類別・一般的名称      | 機械器具77 バイブレーター・家庭用電気マッサージ器                 |
| 医療機器認証番号      | 222AGBZX00232000                           |
| 電源            | AC100V 50/60Hz                             |
| 本体定格電圧        | DC12V                                      |
| 本体定格消費電力      | 20W (待機電力約0.5W)                            |
| 定格時間          | 10分  |
| タイマー          | 約10分                                       |
| 本体外形寸法        | (約)幅550×奥行950~1500×高さ110~780mm (座面高さ110mm) |
| 本体質量          | 約9.5kg                                     |
| 構造部材          | 金属(スチールパイプ)                                |
| クッション材        | ウレタンフォーム                                   |
| 張り材           | ポリエステル、ポリウレタン                              |
| リモコンコード長さ     | 約1m  |
| ACアダプターコード長さ  | 約1.75m                                     |
| 使用可能範囲        | 【身長】約185cmまで 【体重】約90kgまで                   |
| 付属品           | 専用 AC アダプター                                |
| 製造販売元         | 株式会社惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492         |
| 医療機器製造販売業許可番号 | 25B2X10001                                 |



## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口(P14)にお問い合わせください。

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| ① 保証書                         | 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。<br><b>保証期間はお買い上げの日から1年です。</b> |  |
| ② 修理を依頼される<br>ときは <b>持込修理</b> | 保証期間中は   | 修理に際しましては、保証書をご提示ください。<br>保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。                        |
|                               | 保証期間が<br>過ぎているときは  | 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。                                    |
| ③ 補修用性能部品の<br>保有期間            | エアー座イスマッサージャーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。<br>(ただし、縫製部品は除きます)<br>●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。      |  |
| ④ ご転居されるときは                   | ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。                      |  |
| ⑤ 修理料金のしくみ                    | 修理料金＝技術料＋部品代です。  |  |
|                               | 技術料  | 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。 |
|                               | 部品代  | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。                                    |

## 製品を廃棄するときのお願い

機器本体および付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または、規則に従って処理してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせ下さい。

## ご相談窓口

### 家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間)  
9:00～19:00(365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談窓口へ


TEL 0120-8802-28  
FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00～17:30(月～金)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。  
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は  
休ませていただきます。

|                   |   |
|-------------------|---|
| 保証期間中は            | 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 |
| 保証期間が過ぎて<br>いるときは | 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。         |
| 保証期間              | お買い上げの日から1年です。                                  |

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。

### 愛情点検

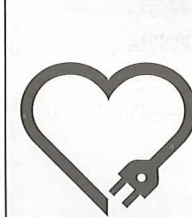

### ⚠ 長年ご使用の家電品の点検を!

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| ご使用の際、<br>このような<br>症状はあり<br>ませんか? | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターや電源コードが異常に熱い</li> <li>●電源コードに深い傷や変形がある</li> <li>●焦げ臭い「におい」がする</li> <li>●操作中に異常な音や振動がする</li> <li>●スイッチを入れても時々動作しないことがある</li> <li>●その他異常や故障がある</li> </ul> | <p>このような症状のときは、<br/>故障や事故防止のため、<br/>スイッチを切り、コンセント<br/>から電源プラグを抜いて、<br/>必ず販売店に点検・修理を<br/>ご相談ください。</p> <p><b>ご使用中<br/>止</b></p> |
|-----------------------------------|--|---|

本書および本製品の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。