

日立 **乾電池式** 歯ブラシ保証書 持込修理

形 名	OL-140		
保証期間	本体:1年(回転歯ブラシは除きます。)		
※お買い上げ日	平成	年	月 日
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所	〒	
	店名	電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(裏面をご覧ください。)

 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

日立 **乾電池式** 歯ブラシ OL-140



HITACHI

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	2~3
各部の名称とはたらき	4
使用方法	5~8
お手入れ	9
仕様	10
「故障かな」と思ったときは	11
保証とアフターサービス	12~13

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を防止するためのものです。必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。

 注意	誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性および物的損害 のみの発生が想定される内容。
--	---

<絵表示の例>

	⊘記号は、してはいけない「 禁止 」内容を示す。 ⊘は「 分解禁止 」
	●記号は、必ず実行していただく「 強制 」内容を示す。 ●は「 一般的な行為 」

 注意	
	歯や歯ぐきの病気にかかっている方、 歯の治療をうけている方は、 歯科医に ご相談の上使用する。
	お子様には正しい使いかたを教える。 (けが・事故の原因)
	歯ブラシを歯ぐきに強く当てすぎない。 (歯ぐきを痛める原因)


注意

	動いている歯ブラシを無理に止めない。 (けが・事故の原因)
	次のことを守らないと電池の発熱、 液漏れ、破裂によりけがや故障の原因 になる。 ● 乾電池の使用表示に従って正しく使用 する。 ● 使用後は必ずスイッチを切る。 ● 定期的に点検(振動・液漏れ)する。 ● 1ヵ月以上使用しないときは、乾電池を 取り出しておく。
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (けが・故障の原因)
	改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解・修理を絶対にしない。 (故障の原因)


注意

- 直射日光の当たるところ、熱器具の近くなどに放置しない。(故障の原因)

各部の名称とはたらき

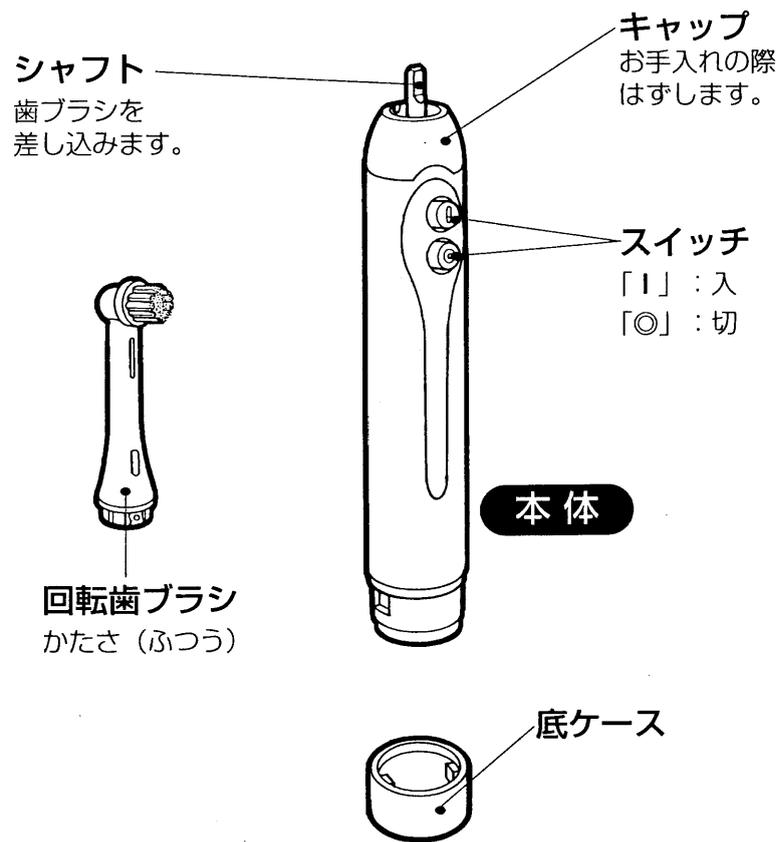


付属品

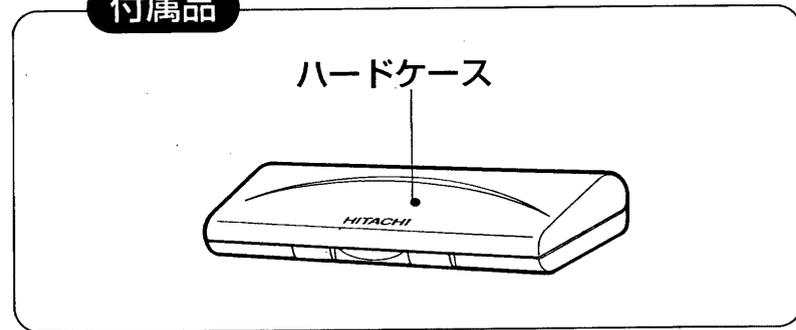

使用方法

乾電池の入れかた


- 1 底ケースを (OPEN) 側へ回してはずす。

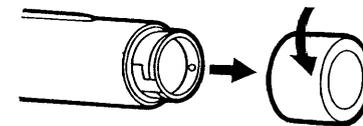

- 2 単3形乾電池を (+) 側から本体へ入れる。

注意

乾電池の (+) (-) を逆に
入れますと動きません。

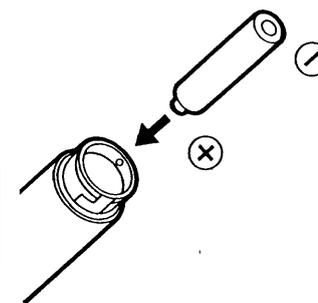

- 3 底ケースを (CLOSE) 側へ回してしっかり取り付ける。

注意

底ケースをしっかり
取り付けないと、水
が入り故障の原因に
なります。


使いかた

⚠注意

歯ブラシを歯ぐきに強く当てすぎない。
(歯ぐきを痛める原因)

1 歯ブラシを本体に取り付ける。

- 図のように歯ブラシの凸部をキャップの凹部に合わせて取り付けます。

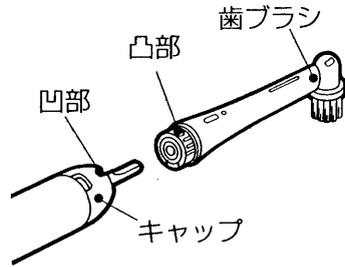


2 「歯みがき」を少量つけ、必ず歯ブラシを口の中に入れてから、スイッチを「I」にする。

注意

- スイッチは爪で押さないでください。(ゴムパッキンが切れて故障の原因)
- 動いている歯ブラシやシャフトを無理に止めないでください。(故障の原因)




3 使用後は、スイッチを「O」にして、本体と歯ブラシをお手入れ後、ハードケースに収納する。

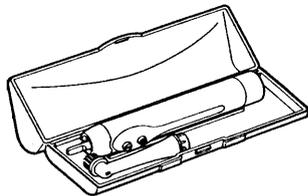

磨きかた


■ 歯の表面

歯面に対して歯ブラシの毛先を直角(90度)に軽く当てて磨く。

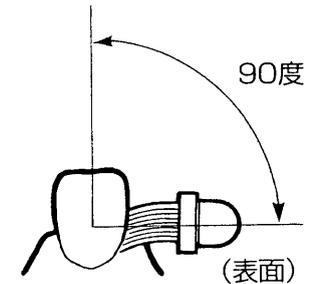

■ 歯の裏面

歯面に対して歯ブラシの毛先を45度の角度で軽く当てて磨く。

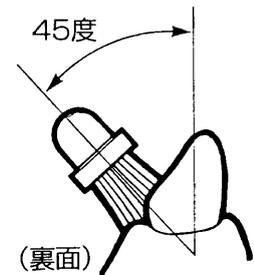


■ 奥歯

歯面に対して歯ブラシの毛先を直角(90度)に軽く当てて磨く。


- 側面は、歯ぐきのカーブに沿ってゆっくりと動かして磨く。

- 奥歯の奥面は、奥歯を包むように歯面に沿って磨く。

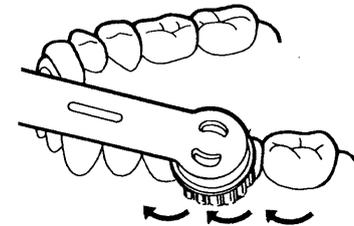


使用方法

- 図のように虫歯になりやすいところを特にていねいに磨きます。

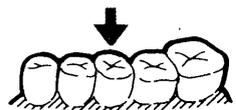

かみ合わせ面

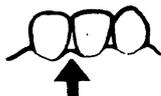

歯と歯の間



歯と歯ぐきの間


- 2分以上を目安にして、磨き残しのないように磨くことをおすすめします。
- 最初歯ぐきからわずかに出血することがありますが、1ヵ月以内に効果があらわれますので、歯ぐきから出血しても磨くことをやめないでください。
- 上の歯と下の歯は別々に磨いてください。
- 痛みをとまなう磨きかたは絶対にしないでください。
- 歯ぐきの出血や痛みがひどい場合は使用を中止して、歯科医にご相談ください。

お手入れ


- 使用の都度、お手入れしてください。

1 キャップをはずす。

- 水抜き穴部分を持って、引っ張ってはずします。

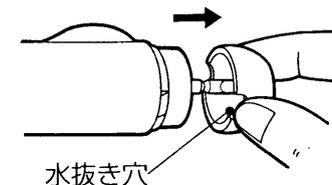

2 本体、シャフト、キャップ、ゴムパッキンなどについた「歯みがき」は、水をかけながら柔らかい布で拭き取る。

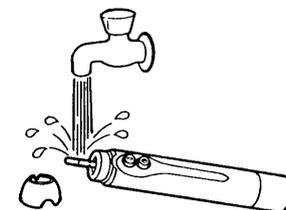

注意

- ゴムパッキンは強くこすったり、引っ張ったりしないでください。また、硬いものや先の尖ったもので突いたりしないでください。(水もれによる故障の原因)
- 熱湯は使用しないでください。(変形・変色の原因)
- 本体は、水の中に放置しないでください。(故障の原因)

- 本体の汚れは、水または薄めた中性洗剤液を含ませて固く絞った布で拭き取る。

注意

アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。(変形・変色の原因)

仕様

電 源	DC 1.5V 単3形アルカリ乾電池 1個
使用回数	約30回 (1回2分として、アルカリ) 乾電池を使用した場合)
振 動 数 (無負荷時)	約2,000回/分
外 形 寸 法	本体：最大直径25×長さ150mm (歯ブラシは除く)
質 量	90g (アルカリ乾電池含む)
付 属 品	ハードケース

替歯ブラシを用意しています。

- 歯ブラシは消耗品です。
毛先が広がりはじめたら、早めに新しい歯ブラシと交換してください。
2~3ヵ月の使用で交換されることをおすすめします。
- 日立の家電品取扱店でお買い求めください。

替歯ブラシ	形名	かたさ	標準価格(税別)
回転歯ブラシ 2本入	OL-031	ふつう	1,000円

(価格には消費税は含まれておりません。平成11年10月現在の価格です。)

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症 状	点検するところ	直す方法
動かない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊕側から入れ直してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げから1年間
------	------------

修理を依頼されるときは

持込修理

11ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、この歯ブラシの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680

電話 (0947) 22-0585

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
-
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

修理メモ